



Transfusion, Onkologie, Apherese, Dialyse

**Flexibilität und Komfort für Blutspende und
Kurzzeit-Behandlung auf höchstem Niveau.**



BasicLine® 3





Elektrisch verstellbare Liegeflächen mit festen Positionsprogrammen: Sitz-, Liege- und Schockposition (Trendelenburg)

Die BasicLine3 verbindet Komfort, Bewegungsfreiheit und durchdachte Funktionalität für Blutspende und Kurzzeitbehandlungen.

Die elektrisch verstellbare, dreigeteilte Liegefläche ermöglicht eine präzise Anpassung von der Sitz- bis zur Liegeposition und unterstützt eine ergonomische Patientenlagerung.

Abklappbare und breitenverstellbare Armlehnen sowie der einfache seitliche Ein- und Ausstieg erleichtern die Behandlung und bieten hohen Patientenkomfort.


Die vollständige Flachlagerung ermöglicht ein vielseitiges Einsatzgebiet und die Trendelenburg-Position sorgt für zusätzliche Sicherheit.

Ein zusätzlicher optionaler Akkubetrieb und weitere auswählbare Optionen machen die BasicLine3 zu einer vielseitig einsetzbaren Lösung für Praxis und Klinik.

Tovega



Tundra

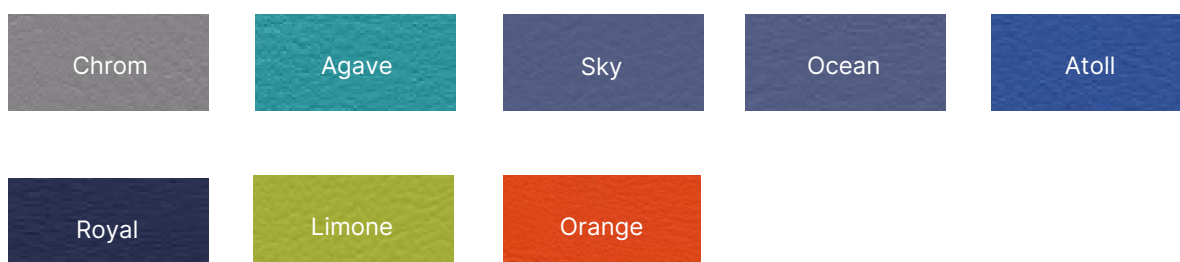




Vollständige Flachlagerung auf Knopfdruck




Abklappbare und breitenverstellbare Armlehnen ermöglichen eine optimale Positionierung der Arme.



Die Segmente können individuell eingestellt werden, die Sitz-, Liege- und Schockposition sind vorprogrammiert.

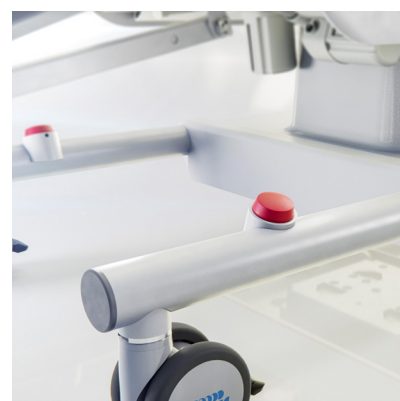

Zwei unabhängige Fußtaster für die Schocklage im vorderen Bereich sowie zusätzliche Schockfunktion am Handschalter.

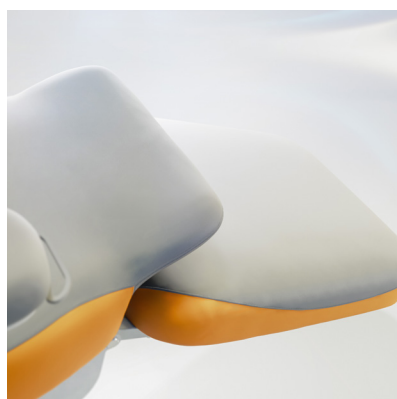

Der gepolsterte Übergang vom Sitzteil zum Beinteil erhöht die Bequemlichkeit.



Vier einzeln gebremste Rollen verleihen der BL3 einen sicheren Stand.



Integrierte Aufnahme für Strom- und Potenzialausgleichskabel. Saubere Kabelführung in den Brüstungskanal.

Zubehör passend zu Ihren Anforderungen



Lampe



Schiebegriff



Infusionsstativ



USB-A/C-Port



Papierrollenhalter

Technische Daten

Abmessungen

Breite inkl. Armstütze	schmal: 83 cm / breit: 92 cm
Breite der Sitzfläche	61 cm
Gesamtlänge	205 cm - 222 cm
Armstütze	52 cm x 15,5 cm

Verstellmöglichkeiten

Rückenteilwinkel	72° - 0°
Sitzteilwinkel	0° - 25°
Beinteilwinkel	26° - 0°

Elektrische Kennwerte

Netzspannung	100-240V, 50/60 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart Steuerung	IPX4
Schutzart Handschalter	IPX6
Motoren	3
Nominale Betriebsspannung Akku (optional)	25,55 V
Kapazität Akku (optional)	2,6 Ah

Sicherheit

Sichere Arbeitslast	250 kg
---------------------	--------

Ihr direkter Kontakt zu uns

Merten Hoy (Beratung Nord)
+49 (0) 170-185 60 64

Kevin Möckel (Beratung Ost)
+49 (0) 170-573 49 57

Axel Prescher (Beratung Süd)
+49 (0) 171-305 26 05

Dennis Reinhardt (Beratung West)
+49 (0) 171-217 53 55

Stella Seidlitz (Beratung Mitte)
+49 (0) 171-848 37 79

Verkaufsdienst
+49 (0) 6172-7576-31 oder -32

Die abgebildete Liege enthält optionales Zubehör, welches nicht in der Standardversion enthalten ist. Die Standardfarbe ist einfarbig Chrom grau.

Bionic Medizintechnik GmbH ... a JMS-corporation · Max-Planck-Straße 21 · D-61381 Friedrichsdorf/Germany
Telefon: +49(0)6172-75760 · Fax: +49(0)6172-757610 · info@bionic-jms.com · www.bionic-jms.com

