



Dialyse, Onkologie, Tagesklinik, Transfusion

ComfortLine3: Therapie braucht Erfahrung, wir liefern sie.



ComfortLine[®]3

The logo for ComfortLine3, featuring a white silhouette of a person sitting in a chair, enclosed within a white circular arc. To the right of this icon, the text "ComfortLine[®]3" is written in a white, sans-serif font.



Elektrisch verstellbare Liegeflächen mit festen Positionsprogrammen: Sitz-, Liege- und Schockposition (Trendelenburg)


Die ComfortLine3 wurde für den anspruchsvollen Praxis- und Klinikalltag entwickelt. Sie verbindet ein modernes, klares Design mit durchdachter Funktionalität und bietet sowohl Patienten als auch Anwendern spürbare Vorteile.

Elektrisch verstellbare Liegesegmente und vordefinierte Positionen ermöglichen eine schnelle und sichere Anpassung an unterschiedliche Behandlungssituationen. Die intuitive Bedienung unterstützt effiziente Arbeitsabläufe und entlastet das Pflege- und Therapiepersonal.


Komfortable Polster, ergonomisch gestaltete Armlehnen sowie ein individuell einstellbares Kopfkissen sorgen für eine angenehme Lagerung der Patienten – auch bei längeren Anwendungen. Geschlossene, pflegeleichte Oberflächen unterstützen zudem hohe Hygienestandards.

Für maximale Flexibilität kann die ComfortLine3 optional im Akkubetrieb eingesetzt werden und ist damit unabhängig vom festen Stromanschluss nutzbar.

Unterschiedliche Farb- und Ausstattungsvarianten ermöglichen eine Anpassung an individuelle Anforderungen.

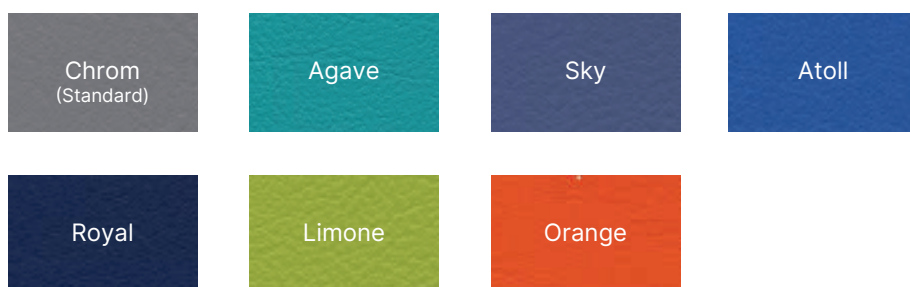

Ergonomische, neig- und schwenkbare Armstützen, die zusätzlich in Höhe und Breite einstellbar sind.

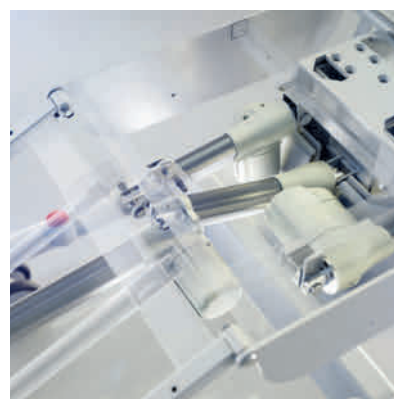

Die fünf Motoren sind leicht zugänglich direkt unter dem abnehmbaren Sitzteil positioniert.



Vollständige Flachlagerung auf Knopfdruck



Ihr Patient kann die Höhe des Kopfkissens leicht mit einer Hand einstellen und so bequem entspannen.



Die Segmente können individuell eingestellt werden, die Sitz-, Liege- und Schockposition sind vorprogrammiert.




Zwei unabhängige Fußtaster für die Schocklage im vorderen Bereich sowie zusätzliche Schockfunktion am Handschalter.



Ausfahrbare Fußstütze, ideal für große Patientinnen und Patienten.




Beidseitig identisch bedienbare Zentralbremsen – kein unnötiges Umgehen der Liege.

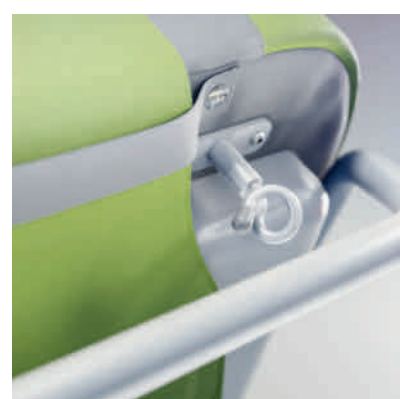

Integrierte Aufnahme für Stromkabel und Potenzialausgleichskabel. Saubere Kabelführung in den Brüstungskanal.

Zubehör passend zu Ihren Anforderungen

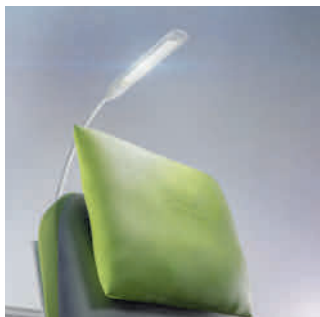

Lampe



Schiebegriff



Infusionsstativ



USB-A/C-Port



Papierrollenhalter

Ihr direkter Kontakt zu uns

Merten Hoy (Beratung Nord)
+49 (0) 170-185 60 64

Kevin Möckel (Beratung Ost)
+49 (0) 170-573 49 57

Axel Prescher (Beratung Süd)
+49 (0) 171-305 26 05

Dennis Reinhardt (Beratung West)
+49 (0) 171-217 53 55

Stella Seidlitz (Beratung Mitte)
+49 (0) 171-848 37 79

Verkaufsdienst
+49 (0) 6172-7576-31 oder -32

Technische Daten

Abmessungen

Breite inkl. Armstütze	Schmal: 83 cm / breit: 92 cm
Breite der Sitzfläche	61 cm
Gesamtlänge	205 cm - 222 cm
Armstütze	52 cm x 15,5 cm
Gesamtgewicht	105 kg (Grundausrüstung)

Verstellmöglichkeiten

Rückenteilwinkel	72° - 0°
Sitzteilwinkel	0° - 25°
Beinteilwinkel	26° - 0°
Fußstütze, elektrisch	31 cm
Höhenverstellung	54 cm - 75 cm

Elektrische Kennwerte

Netzspannung	100-240V, 50/60 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart Steuerung	IPX4
Schutzart Handschalter	IPX6
Motoren	5
Nominale Betriebsspannung Akku (optional)	25,55 V
Kapazität Akku (optional)	2,6 Ah

Sicherheit

Sichere Arbeitslast	250 kg
---------------------	--------

Die abgebildete Liege enthält optionales Zubehör, welches nicht in der Standardversion enthalten ist. Die Standardfarbe ist einfarbig Chrom grau.

