



Dialyse, Onkologie, Tagesklinik, Transfusion

Die vielseitige Behandlungsliege für höchste Ansprüche an Komfort, Sicherheit und Flexibilität.





Elektrisch verstellbare Liegeflächen mit festen Positionsprogrammen: Sitz-, Liege- und Schockposition (Trendelenburg)

Die UniversalLine3 verbindet funktionales Design mit vielseitiger Ausstattung für den Praxis- und Klinikalltag.

Die elektrisch verstellbare Liegefläche ermöglicht eine schnelle und komfortable Anpassung an unterschiedliche Behandlungssituationen und unterstützt einen ergonomischen Arbeitsablauf.

Eine komfortable Polsterung, eine individuell einstellbare Nackenrolle und verstellbare Armstützen sowie die sich automatisch anpassende Fußstütze sorgen für eine angenehme und sichere Patientenlagerung.

Pflegeleichte Oberflächen, verschiedene Farb- und Ausstattungsvarianten sowie optionaler Akkubetrieb bieten zusätzliche Flexibilität und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

Tovega

Ashgrey	Slate Grey	Atoll	Ocean Blue	Olive Green
Lime				

Tundra

Chrom	Agave	Sky	Ocean	Atoll
Royal	Limone	Orange		



Abklappbare und breitenverstellbare Armlehnen.



Die Fußstütze wird einmal auf die Körpergröße eingestellt und passt sich automatisch jeder Liegenverstellung an.




Vollständige Flachlagerung auf Knopfdruck



Die Höhe der Nackenrolle kann leicht mit einer Hand eingestellt werden.



Die Segmente können individuell eingestellt werden, die Sitz-, Liege- und Schockposition sind vorprogrammiert.

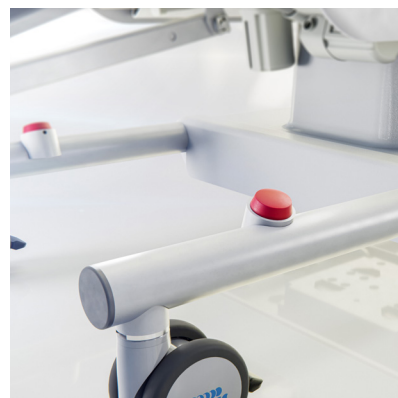

Zwei unabhängige Fußtaster für die Schocklage im vorderen Bereich sowie zusätzliche Schockfunktion am Handschalter.



Ausfahrbare Fußstütze, ideal für große und kleine Patientinnen und Patienten.



Sicherer Stand durch einzeln gebremste Rollen. Jede Rolle kann separat gebremst werden.



Integrierte Aufnahme für Strom- und Potenzialausgleichskabel. Saubere Kabelführung in den Brüstungskanal.

Zubehör passend zu Ihren Anforderungen



Lampe



Schiebegriff



Infusionsstativ



USB-A/C-Port



Papierrollenhalter

Technische Daten

Abmessungen

Breite inkl. Armstütze	schmal: 83 cm / breit: 92 cm
Breite der Sitzfläche	61 cm
Gesamtlänge	205 cm - 222 cm
Armstütze	52 cm x 15,5 cm

Verstellmöglichkeiten

Rückenteilwinkel	72° - 0°
Sitzteilwinkel	0° - 25°
Beinteilwinkel	26° - 0°
Höhenverstellung	54 cm - 75 cm

Elektrische Kennwerte

Netzspannung	100-240V, 50/60 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart Steuerung	IPX4
Schutzart Handschalter	IPX6
Motoren	4
Nominale Betriebsspannung Akku (optional)	25,55 V
Kapazität Akku (optional)	2,6 Ah

Sicherheit

Sichere Arbeitslast	250 kg
---------------------	--------

Ihr direkter Kontakt zu uns

Merten Hoy (Beratung Nord)
+49 (0) 170-185 60 64

Kevin Möckel (Beratung Ost)
+49 (0) 170-573 49 57

Axel Prescher (Beratung Süd)
+49 (0) 171-305 26 05

Dennis Reinhardt (Beratung West)
+49 (0) 171-217 53 55

Stella Seidlitz (Beratung Mitte)
+49 (0) 171-848 37 79

Verkaufsdienst
+49 (0) 6172-7576-31 oder -32

Die abgebildete Liege enthält optionales Zubehör, welches nicht in der Standardversion enthalten ist. Die Standardfarbe ist einfarbig Chrom grau.

Bionic Medizintechnik GmbH ... a JMS-corporation · Max-Planck-Straße 21 · D-61381 Friedrichsdorf/Germany
Telefon: +49(0)6172-75760 · Fax: +49(0)6172-757610 · info@bionic-jms.com · www.bionic-jms.com

